

# #AUDIOPROTESISTA INSIEME A TE!

*Gentile Cliente,  
in questo momento di emergenza vogliamo  
esprimerti la nostra vicinanza con la  
fiducia che presto arrivino tempi migliori.*

*Per la tua sicurezza, abbiamo pensato di  
inviarti questa guida per attuare alcuni  
interventi di emergenza nel tuo apparecchio  
acustico a casa, per evitare il più  
possibile gli spostamenti.*



# COVID-19

*Conosciamo tutti la situazione di emergenza nazionale che il nostro paese sta affrontando per contrastare la diffusione del virus COVID-19. In CRAI stiamo seguendo con la massima attenzione tutte le istruzioni richieste dal Ministero della Salute con l'obiettivo di mantenere massimi standard di sicurezza e di servizio.*

*Ma abbiamo deciso di fare di più per aiutarvi ad affrontare questa situazione difficile, insieme, perchè se ognuno di noi, proprio come in un ingranaggio, farà la sua parte riusciremo ad affrontare meglio la situazione e uscirne limitando al massimo le conseguenze e ritornare quanto prima alla normalità.*

*Per la tua sicurezza, abbiamo pensato di inviarti questa guida per attuare alcuni interventi di emergenza nel tuo apparecchio acustico a casa, per evitare il più possibile gli spostamenti.*

# #GUIDA N°1

SEMPRE AL VOSTRO FIANCO

Il tuo apparecchio acustico

**NON FUNZIONA?**  
**NON SENTI PIÙ I SUONI?**




**ECCO** alcune cose che **puoi fare da casa** per ripristinare il funzionamento **del tuo apparecchio acustico:**

# 1. VERIFICARE LA BATTERIA

## Molte volte,

nel caso l'apparecchio acustico  
**non funzioni correttamente,**  
**la prima cosa da fare** è verificare  
la batteria

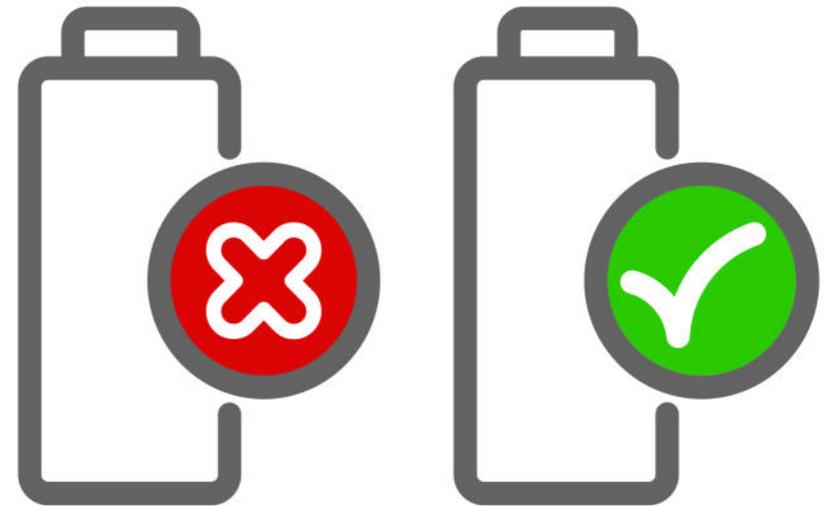


# APPARECCHIO ACUSTICO RICARICABILE:

**Assicurati che la batteria sia carica;**

Inserisci bene gli apparecchi nella base di ricarica, **se la luce lampeggia di rosso vuol dire che l'apparecchio acustico è scarico;**


Attendi il caricamento secondo le istruzioni del tuo libretto.

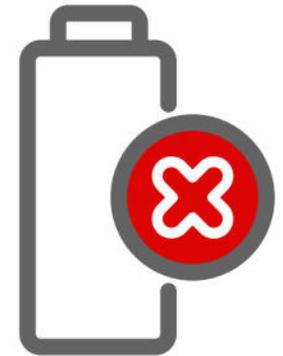


# 1. VERIFICARE LA BATTERIA:



**Quando la luce è verde** gli apparecchi acustici  
**sono pronti** ad essere utilizzati;

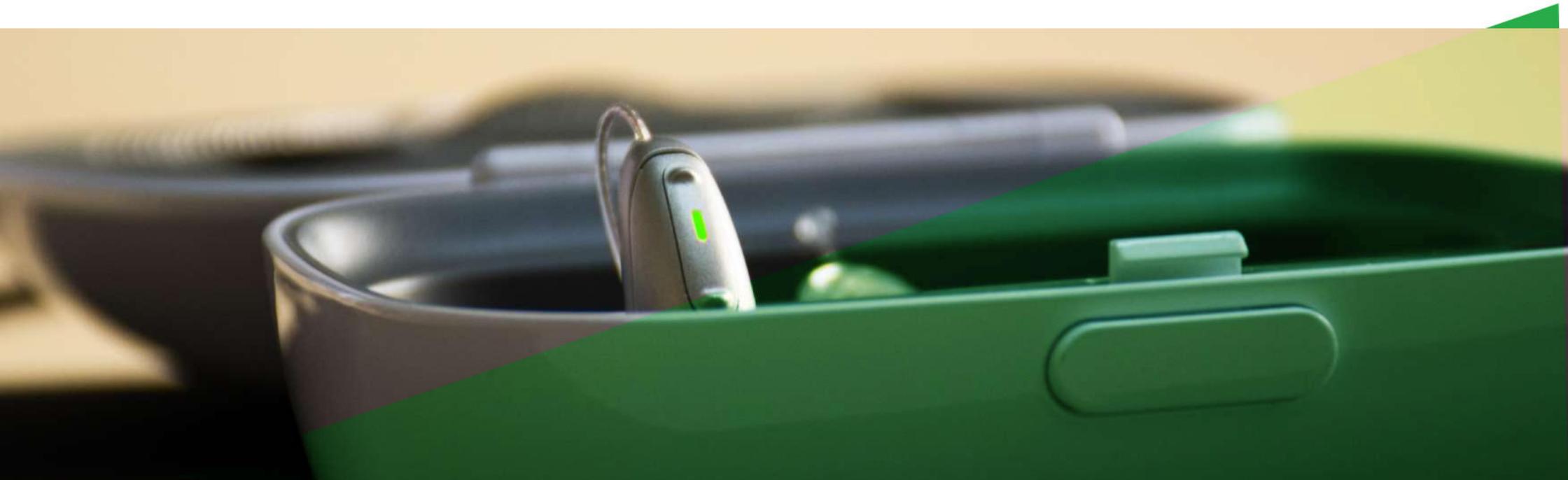


# 2. CAMBIARE LA BATTERIA

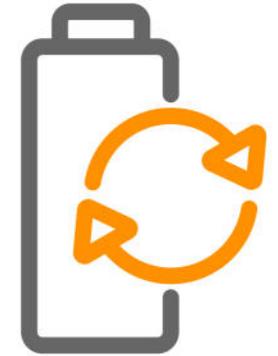


**1.** Apri il vano batteria;

**2.** Rimuovi la batteria - puoi utilizzare le mani o lo spazzolino con la calamita.

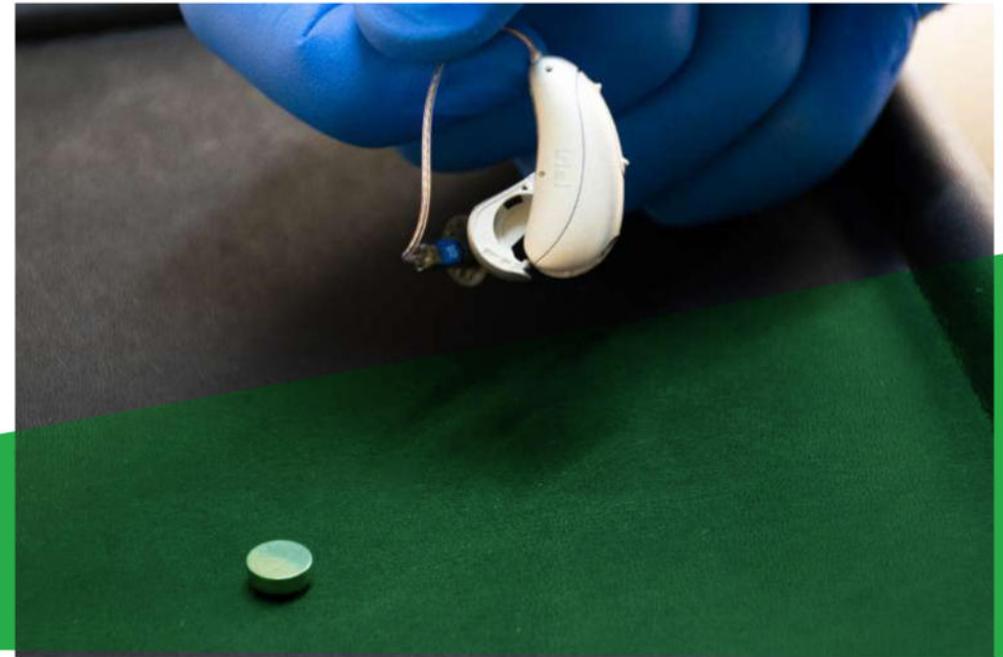


## 2. CAMBIARE LA BATTERIA

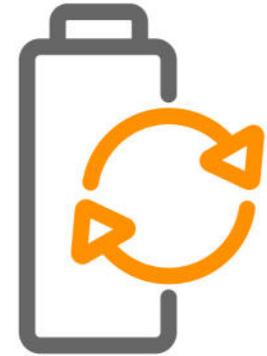

**3.** Prendi la pila nuova dal Blister




**4.** inserisci la pila assicurandoti che sia nel verso giusto - **IMPORTANTISSIMO!**

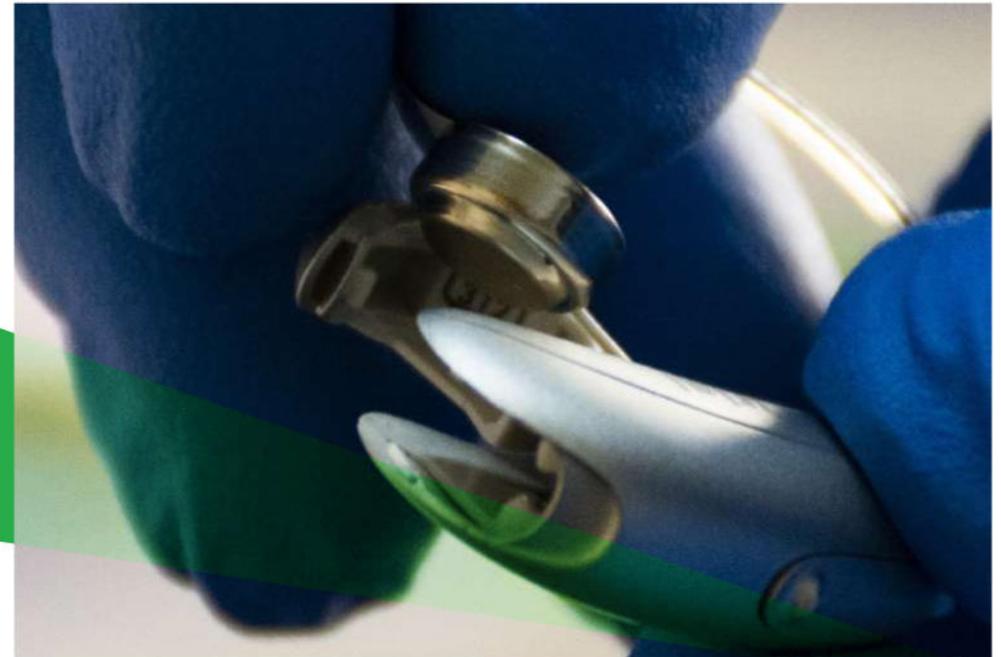

## 2. CAMBIARE LA BATTERIA



**5.** Richiudere lo sportellino pila - se lo sportellino non si chiude facilmente sentendo il tipico “Click”, **NON FORZARE** la chiusura. Prova a girare la pila e a chiudere nuovamente lo sportello.  
**NOTA:** Lo stesso procedimento di sostituzione pila può essere seguito anche per apparecchi endoauricolari.

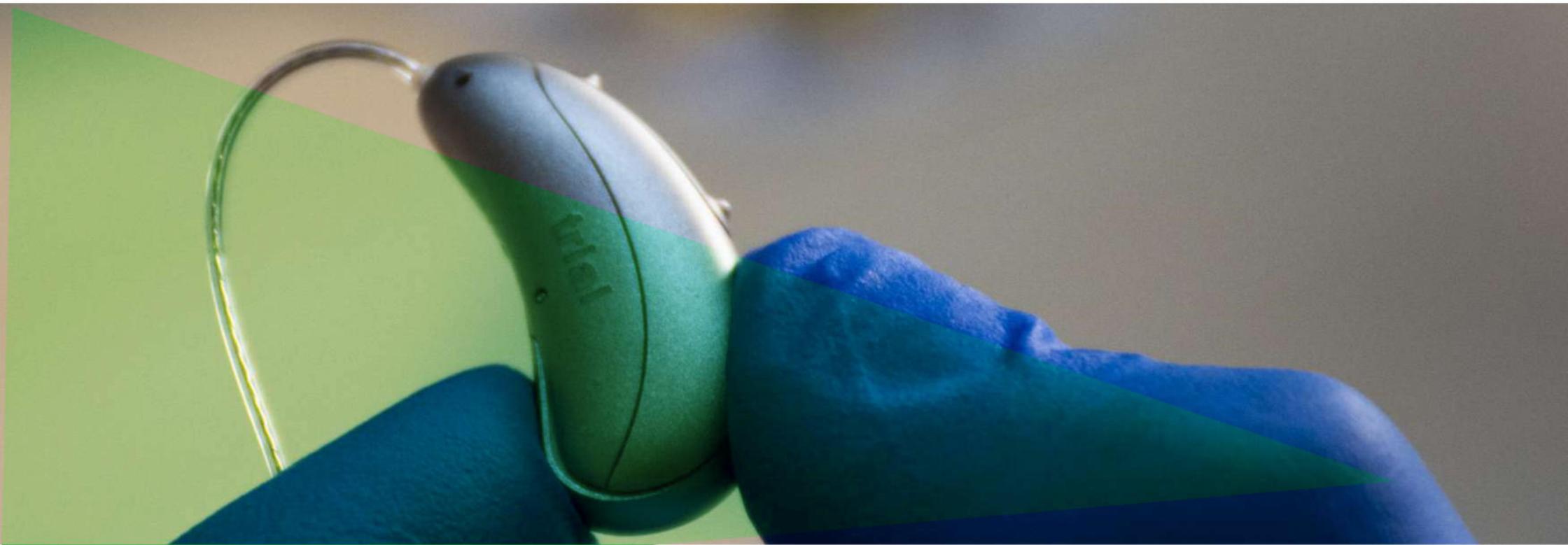


# 3. SOSTITUZIONE PARA-CERUME

Se ti sembra di **sentire male** con il tuo apparecchio acustico o di **non sentire nulla**, dopo il cambio pila è necessario cambiare il **para-cerume** per assicurarsi che non sia intasato. Controlla che nella punta del tuo apparecchio acustico non ci sia del cerume che blocca la fuori uscita del suono. Nel caso vi sia, segui le istruzioni di seguito:




## 3. SOSTITUZIONE PARA-CERUME

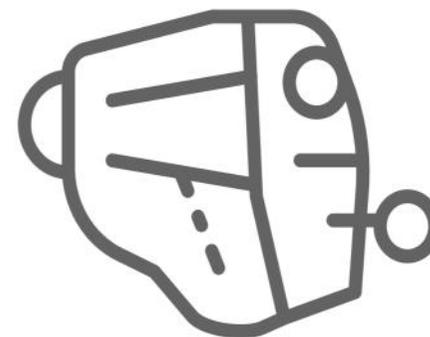

**7.** Per prima cosa, con lo spazzolino prova a **spazzolare delicatamente** la punta del paracerume per rimuovere la sporcizia.

Nel caso non funzionasse è necessario effettuare la **sostituzione del para-cerume;**

# 3.1 PARA-CERUME: CERUSTOP

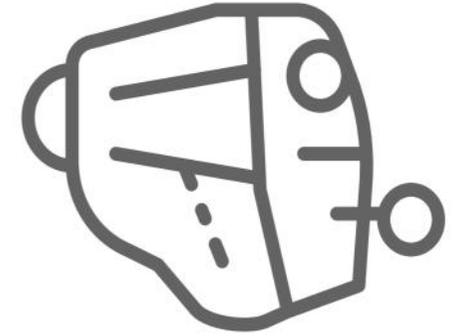


**2.** Controlla che il para-cerume non sia occluso




**3.** Prendi lo strumento per fare il cambio di para-cerume




## 3.1 PARA-CERUME: CERUSTOP

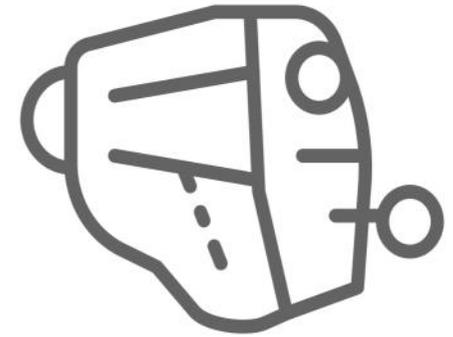


**4.** Rimuovi il para-cerume col lato libero

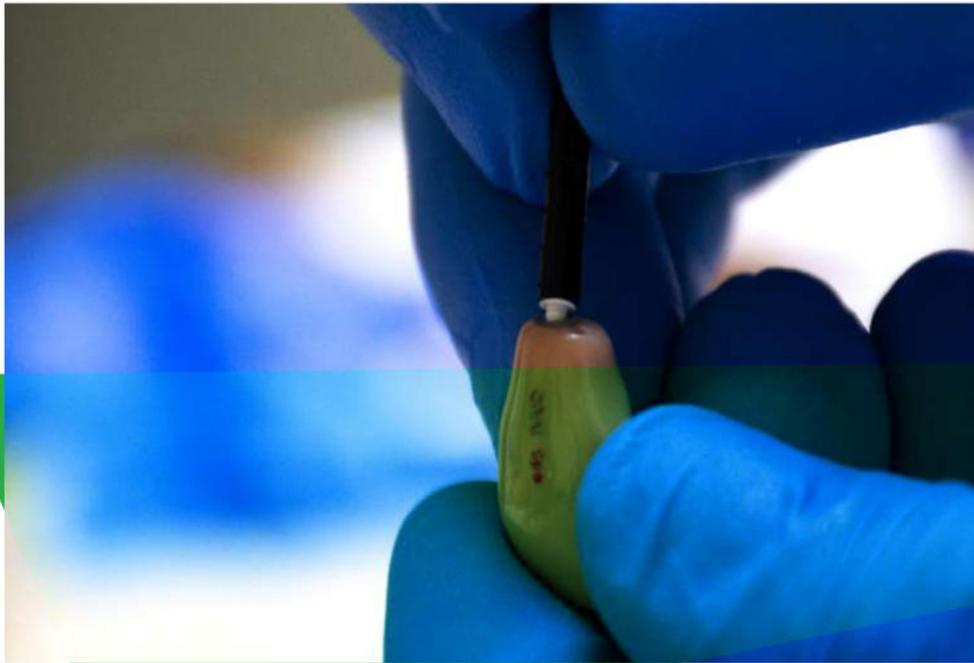


**5.** Inserisci il nuovo para-cerume

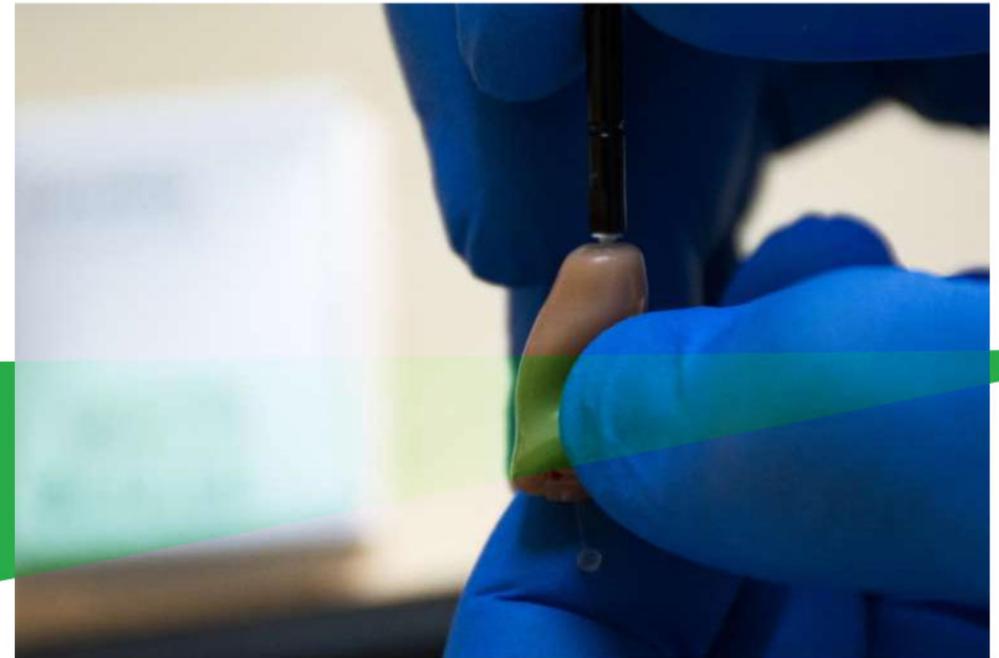


# 3.2 PARA-CERUME: HF3

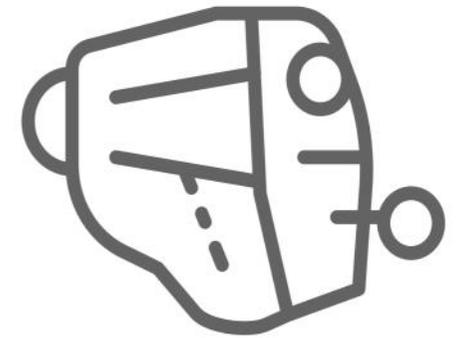


Prendi lo strumento per fare il cambio cerume. Fai attenzione al lato (destro-rosso; sinistro-blu);

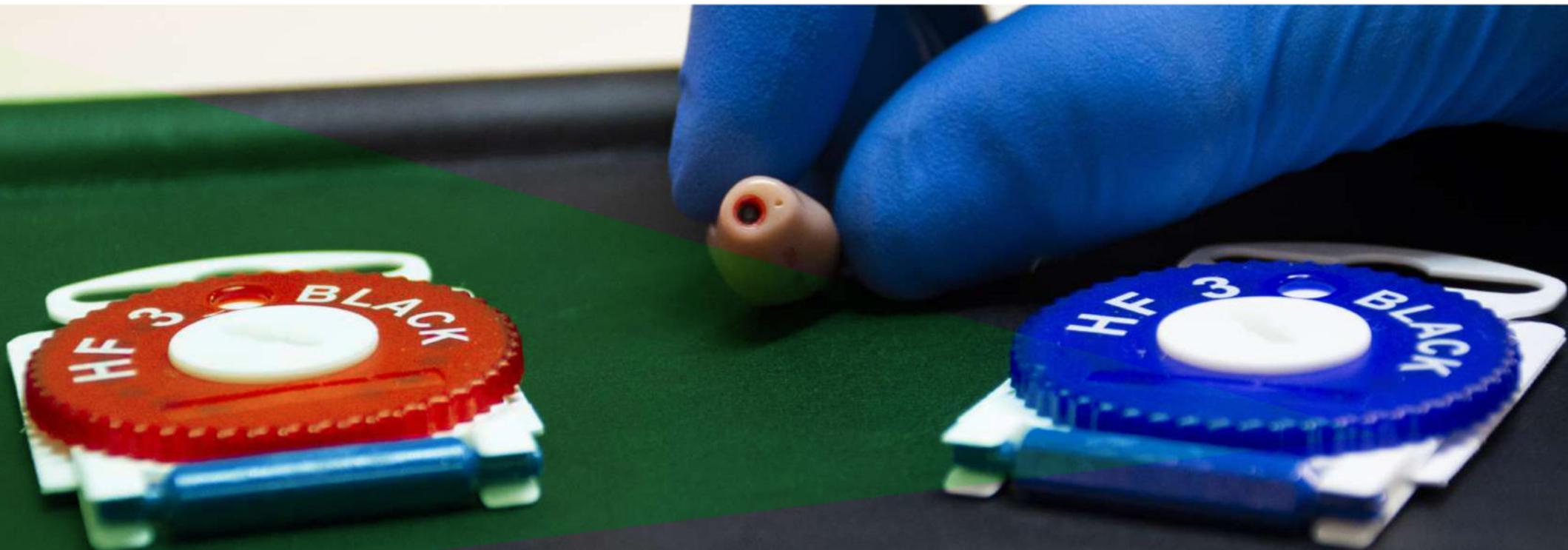


## 3.2 PARA-CERUME: HF3

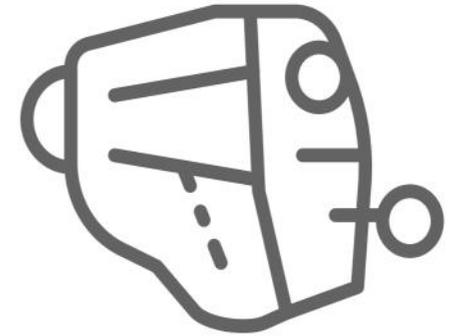


**1.** Rimuovi il para-cerume utilizzando la parte filettata, avvitando sul para-cerume;

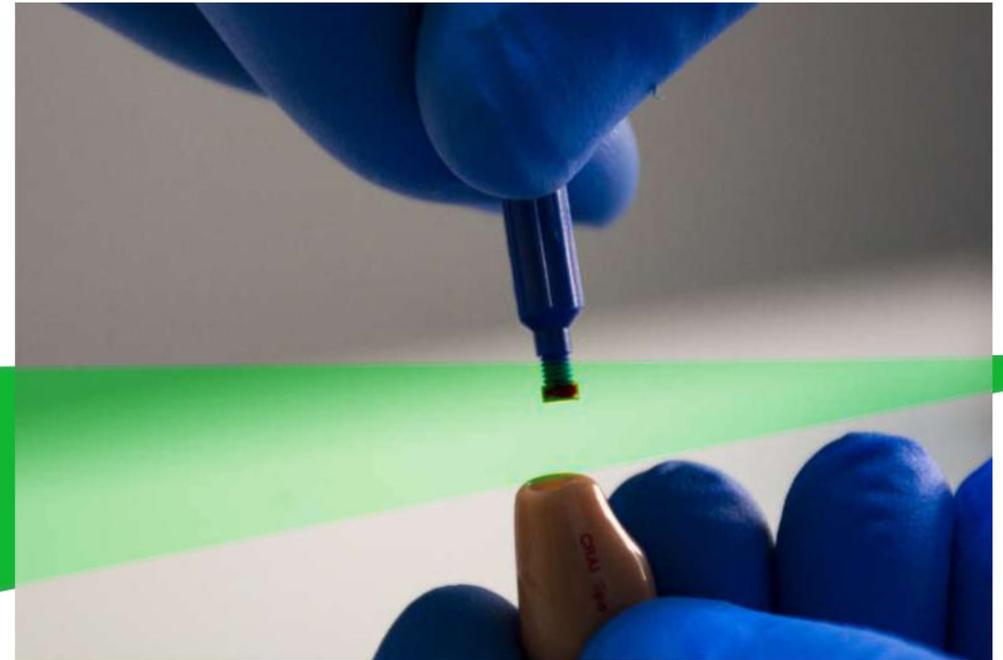


## 3.2 PARA-CERUME: HF3

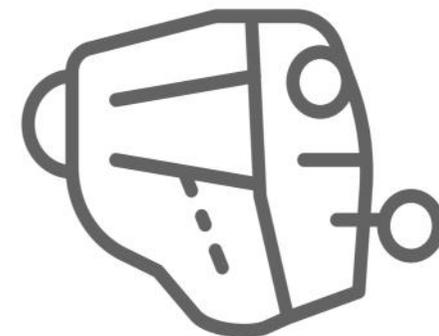



**2.** Prendi il nuovo para-cerume facendo una leggera pressione con la stecchetta blu utilizzata dal lato opposto della parte filettata

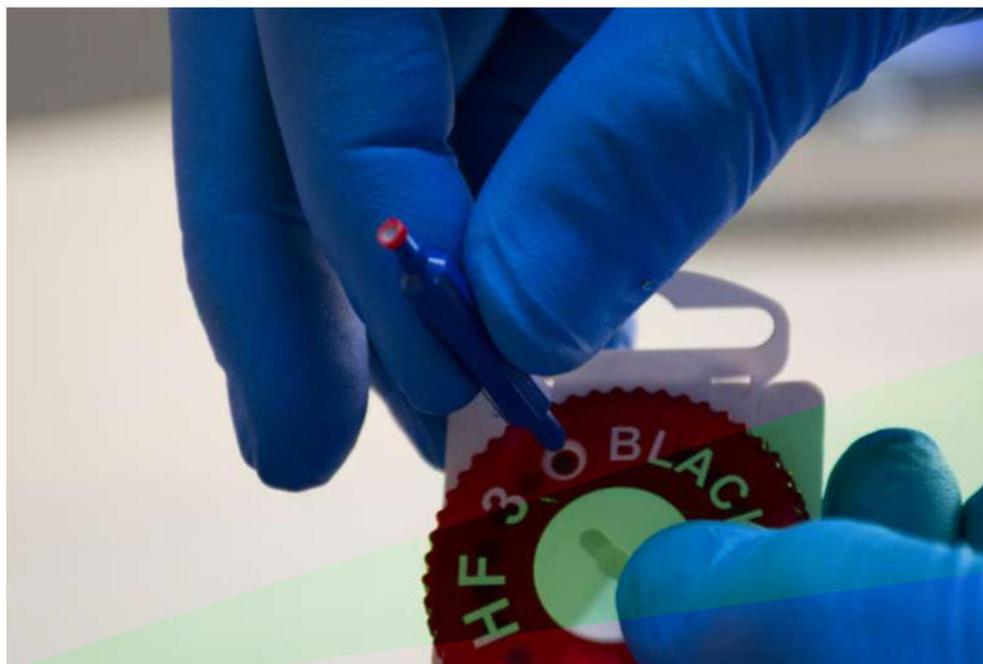

**3.** Utilizza la parte NON filettata per applicare il nuovo para-cerume

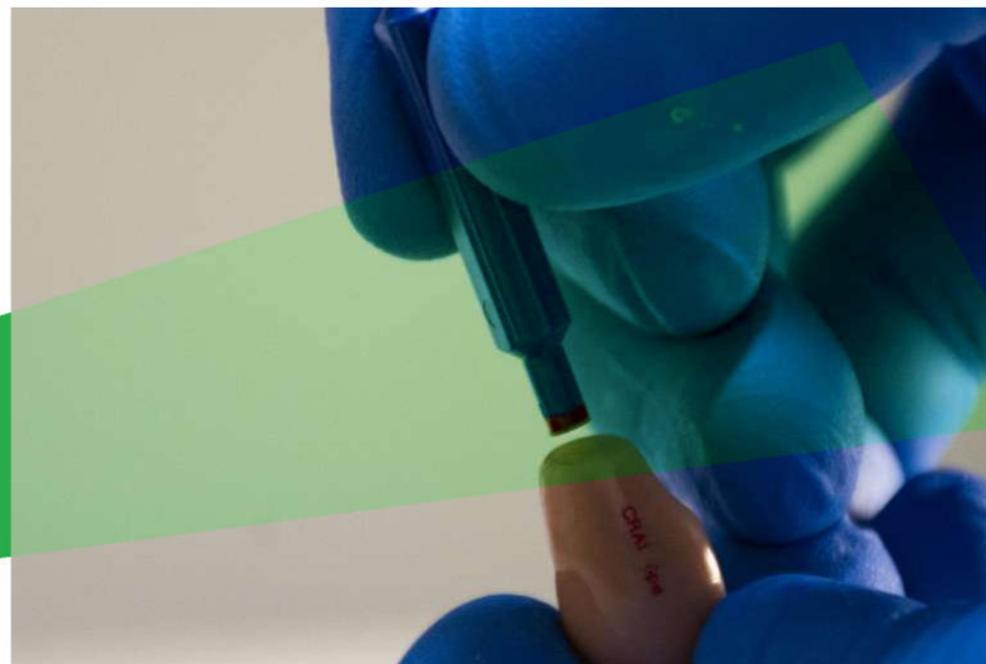

## 3.2 PARA-CERUME: HF3

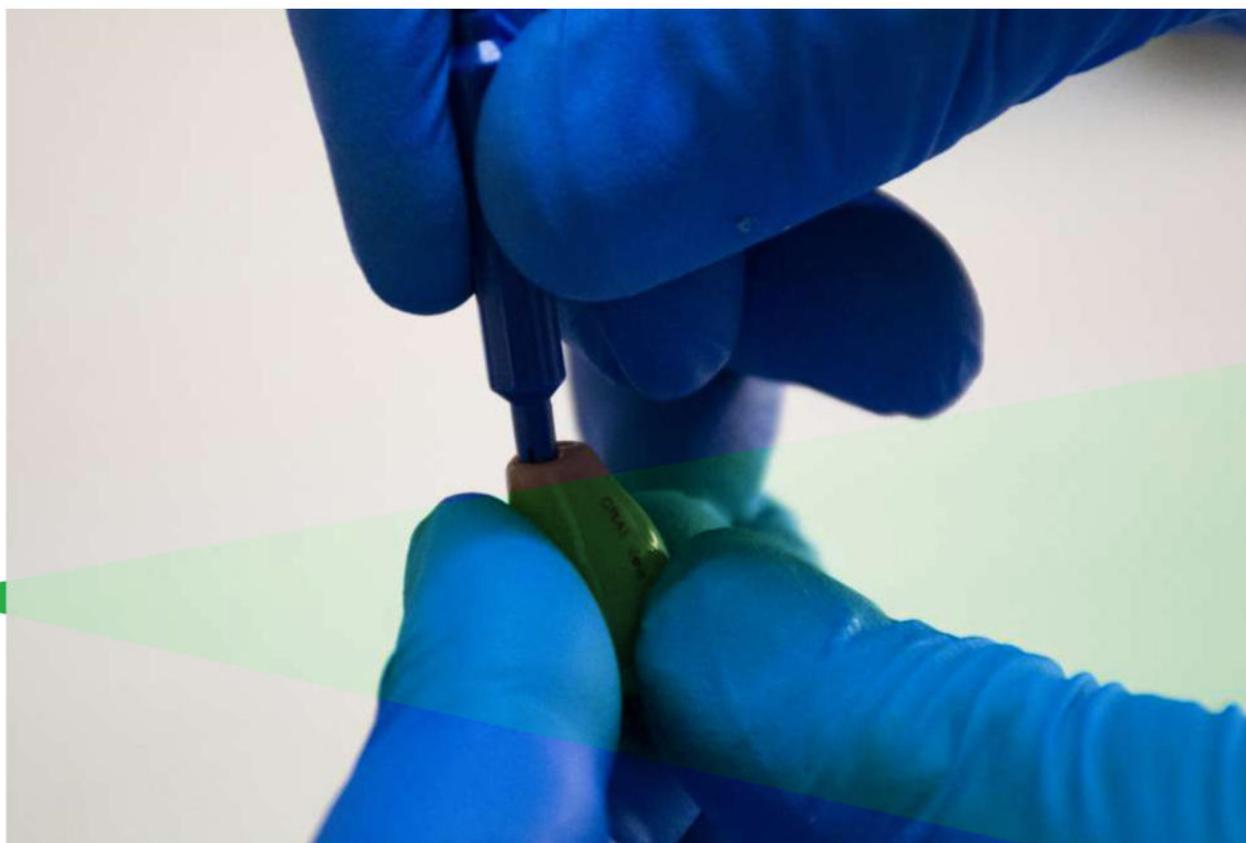
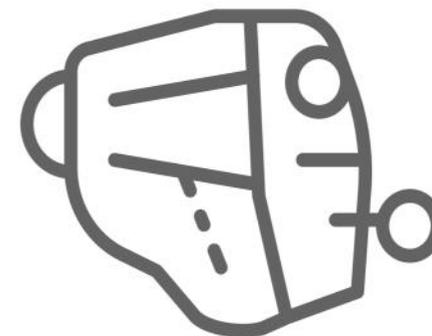


**4.** Innesta il nuovo para-cerume sull'apparecchio acustico facendo una leggera pressione;

# 3.3 **PARA-CERUME:** **RICEVITORE NEL CONDOTTO**



**1-2.** Rimuovi la cupolina in silicone come mostrato in foto **1** e **2**

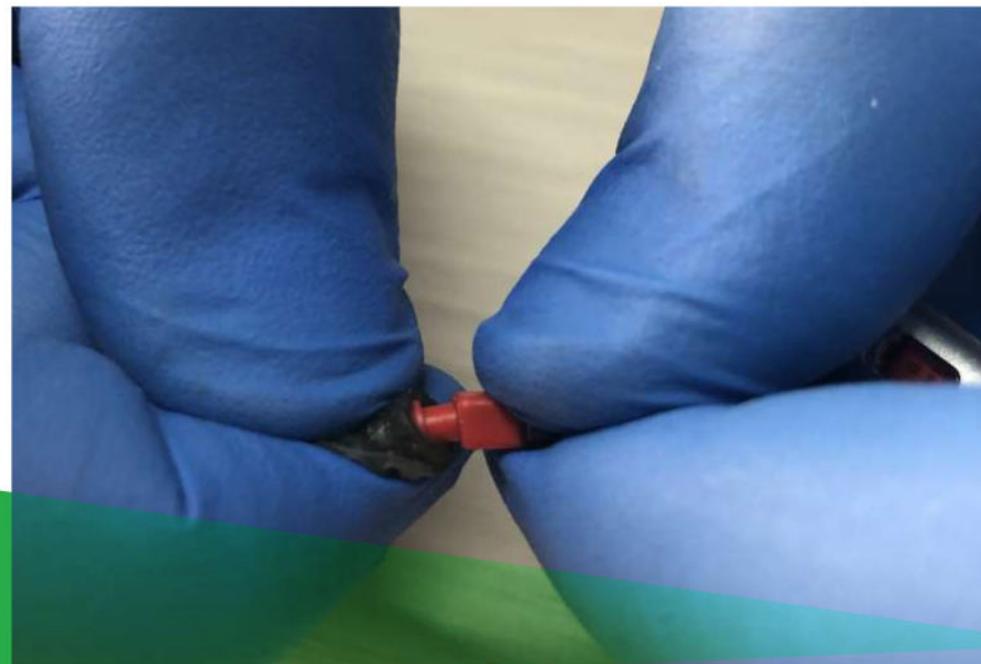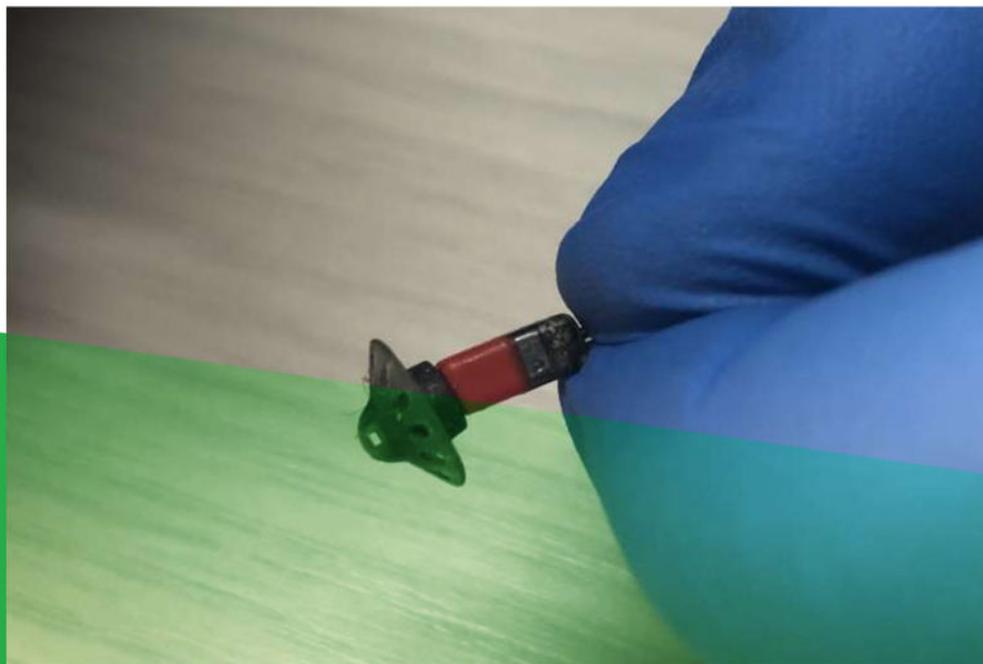

### **3.3 PARA-CERUME: RICEVITORE NEL CONDOTTO**




**3-4.** Rimuovere il para-cerume inserendo il ricevitore nella sede indicata con il simbolo del cestino e indicato con il **numero 1**



### **3.3 PARA-CERUME: RICEVITORE NEL CONDOTTO**



**5-6.** Applica il nuovo para-cerume inserendo il ricevitore nella sede indicata con il **numero 2**

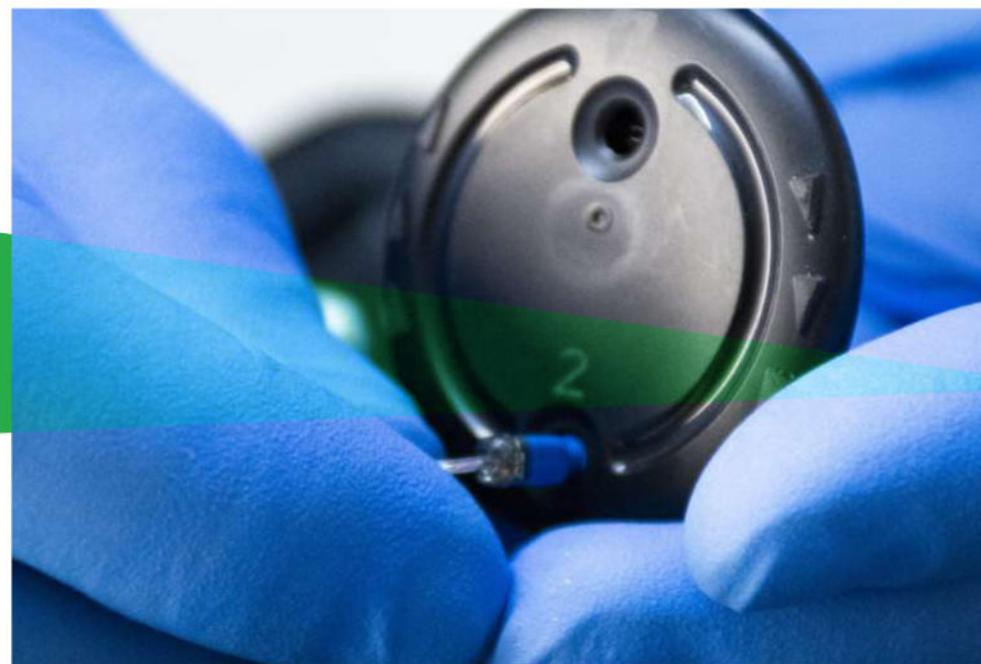

***#ANDRÁTUTTOBENE***