

#AUDIOPROTESISTA INSIEME A TE!

*Gentile Cliente,
in questo momento di emergenza vogliamo
esprimerti la nostra vicinanza con la
fiducia che presto arrivino tempi migliori.*

*Per la tua sicurezza, abbiamo pensato di
inviarti questa guida per attuare alcuni
interventi di emergenza nel tuo apparecchio
acustico a casa, per evitare il più
possibile gli spostamenti.*



COVID-19

Conosciamo tutti la situazione di emergenza nazionale che il nostro paese sta affrontando per contrastare la diffusione del virus COVID-19. In CRAI stiamo seguendo con la massima attenzione tutte le istruzioni richieste dal Ministero della Salute con l'obiettivo di mantenere massimi standard di sicurezza e di servizio.

Ma abbiamo deciso di fare di più per aiutarvi ad affrontare questa situazione difficile, insieme, perchè se ognuno di noi, proprio come in un ingranaggio, farà la sua parte riusciremo ad affrontare meglio la situazione e uscirne limitando al massimo le conseguenze e ritornare quanto prima alla normalità.

Per la tua sicurezza, abbiamo pensato di inviarti questa guida per attuare alcuni interventi di emergenza nel tuo apparecchio acustico a casa, per evitare il più possibile gli spostamenti.

#GUIDA N°2

SEMPRE AL VOSTRO FIANCO

La manutenzione e la cura del tuo apparecchio acustico è sempre importante, ed in questo periodo lo è anche di più.

Diventa dunque **essenziale**, per **garantirne il completo funzionamento ed evitare spostamenti per la riparazione**, avere le giuste indicazioni per poter curare il proprio apparecchio **comodamente da casa**.

Di seguito una piccola guida per mantenere sempre pulito il tuo apparecchio acustico.



1. PREPARA L'OCCORRENTE



- Contenitore bianco per igienizzazione;
- Filtro in plastica trasparente (situato all'interno del bicchiere);
- Pastiglie deumidificanti;
- Pastiglie effervescenti;
- Spray disinfettante per apparecchi acustici;

COSA **NON** FARE!



NON INSERIRE MAI

gli apparecchi acustici nel bicchiere con l'acqua, in quanto tali apparecchi sono costituiti da componenti elettronici che si rovinerebbero irrimediabilmente.



2. COSA FARE! PROCEDURA




1. È IMPORTANTISSIMO scollegare i tubetti auricolari dagli apparecchi acustici per poter eseguirne la corretta procedura di manutenzione.



2.1 PROCEDURA LAVAGGIO

2. Togliere il bicchierino trasparente filtro dal contenitore bianco.

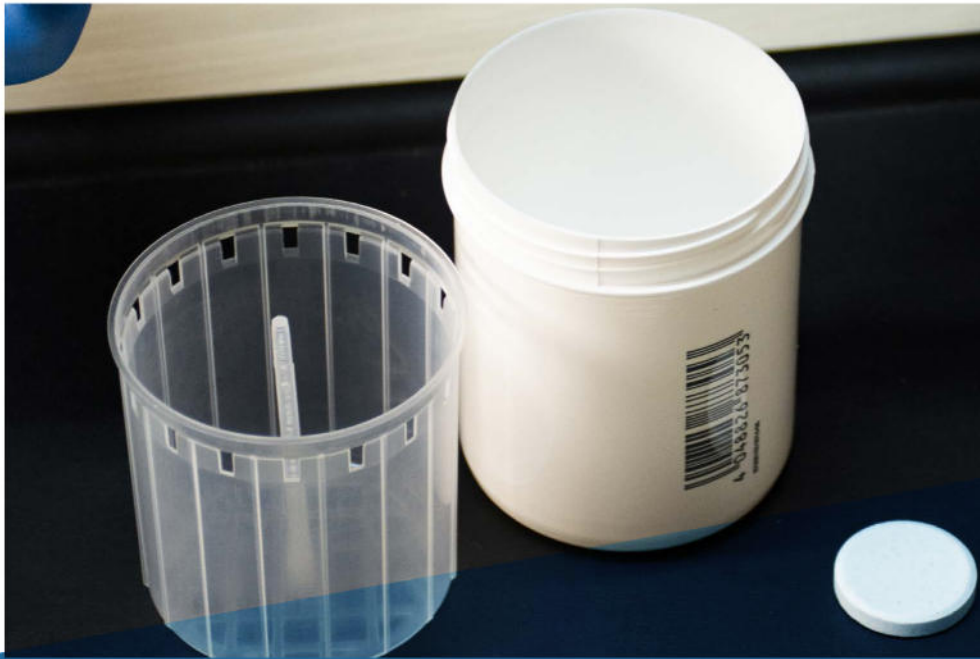


3. Mettere una pastiglia effervescente nel contenitore bianco e gli auricolari (o i tubi Slim) nel bicchierino trasparente. Successivamente, rimettere il bicchiere trasparente dentro il contenitore bianco, riempirlo con acqua tiepida fino a 3/4 ed attendere 5 minuti.




2.2 PROCEDURA ASCIUGATURA



4. Una volta fatti asciugare, rimuovi eventuale acqua / condensa all'interno dei tubetti. Inserisci la Pompetta dalla parte del tubicino e fai pressione per far entrare aria fino a che non risulta tutto asciutto.

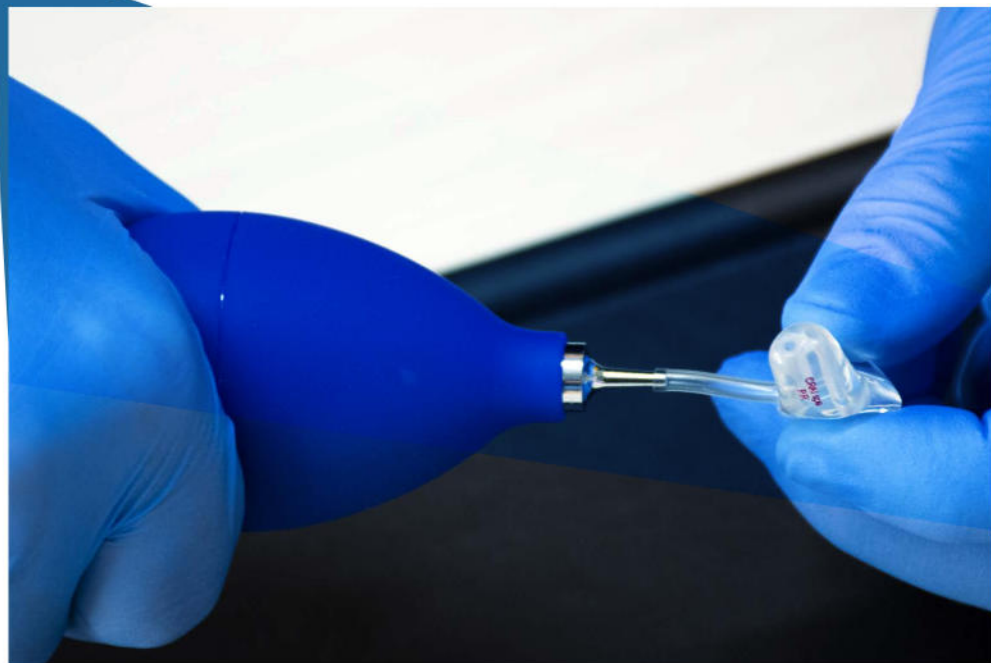


5. Per asciugare i tubi Slim invece, utilizzare il filo igienico in dotazione: inserire da un capo del tubo il filo igienico dal lato più sottile e robusto, fino a farlo uscire dal capo opposto.

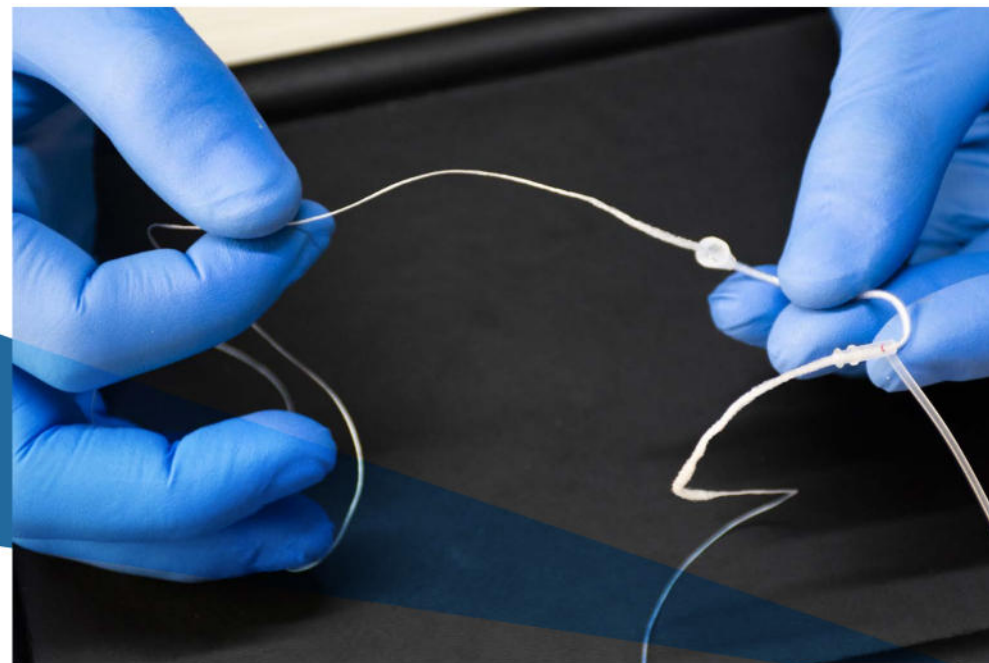

2.3 PROCEDURA IGIENIZZAZIONE



1. Per igienizzare gli apparecchi acustici, assicurarsi prima di tutto di aver rimosso la batteria, e munirsi dell'apposito spray igienizzante.

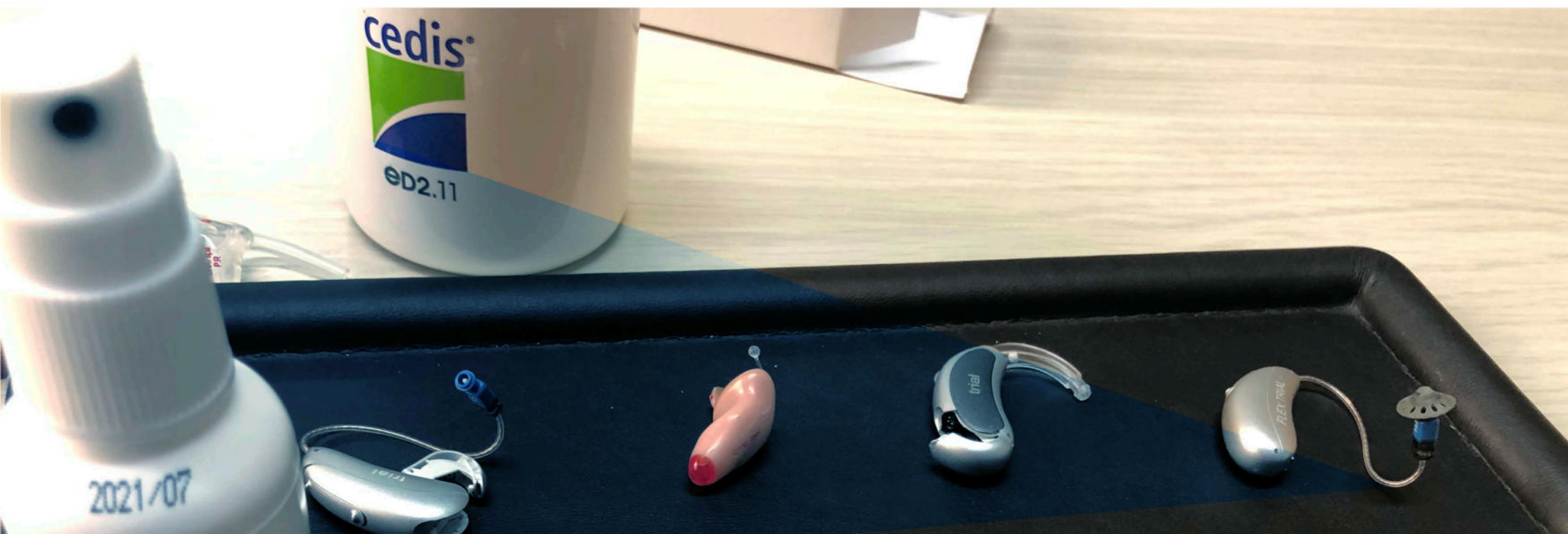

2.3 PROCEDURA IGIENIZZAZIONE



**NON
UTILIZZARE
MAI**

lo spray direttamente sull'
apparecchio acustico.




2.3 PROCEDURA IGIENIZZAZIONE



APPLICARE

lo spray su un panno.
Successivamente, effettuare
la pulizia dell'apparecchio
acustico.

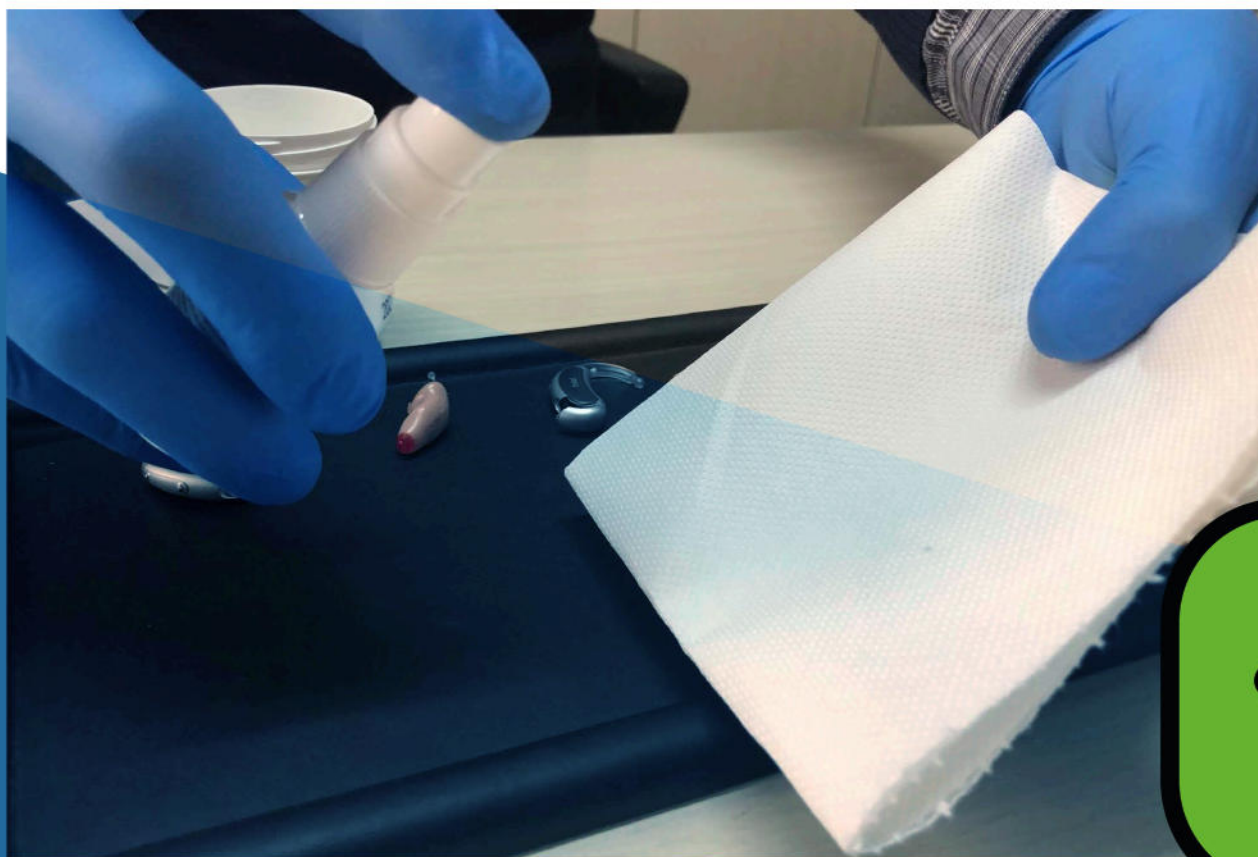

#ANDRÁTUTTOBENE